

ファーストケア Ver.5

インストール手順書



ファーストケアのご利用には、パソコンにインストールが必要です。

※パソコンに「ファーストケア体験版」がインストールされている場合は、インストール作業を省略できます。

インストールの注意点

インストールの前に以下①～④をご確認ください。

- ① WindowsXP は推奨しておりません。WindowsVista/Windows7/Windows8にインストールしてください。
- ② ご使用されているパソコンのコンピューター名が日本語（全角）ですと、正常にインストール処理が完了しないことがあります。半角英数のコンピューター名に変更をお願いします。
- ③ インストールの際はセキュリティソフト（ウイルスバスターなど）のファイアウォールを停止してください。停止せずにインストールした場合は、正常にインストール処理が完了しないことがあります。



※上記の確認方法などの詳細は、FirstCare ユーザーサポート情報『インストールについて』をご確認下さい。

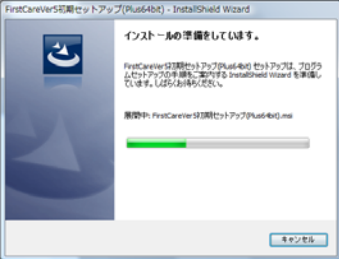
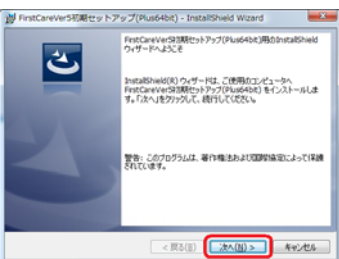
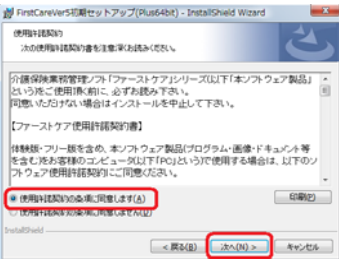
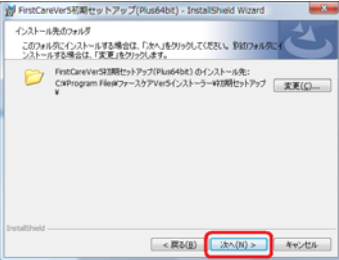
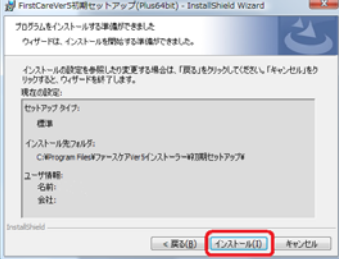
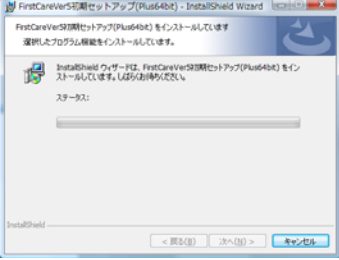
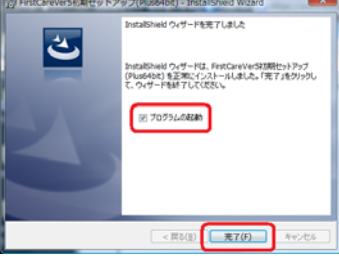
●FirstCare ユーザーサポート情報はこちら → <http://www.fc-center.jp/support/65.html>

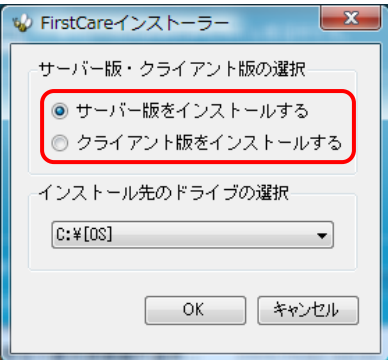
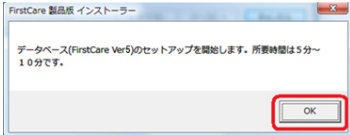

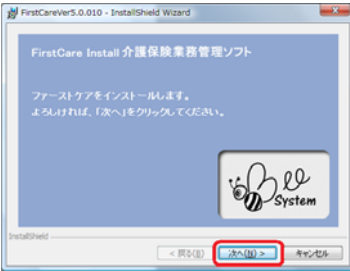
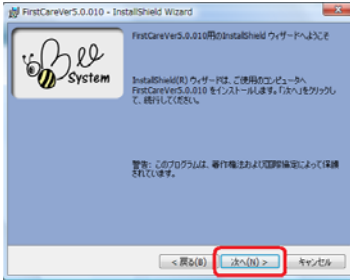
インストールの開始

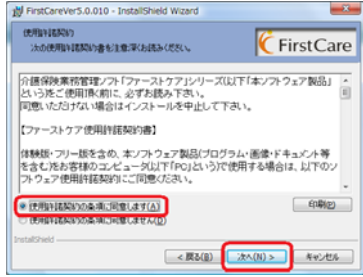
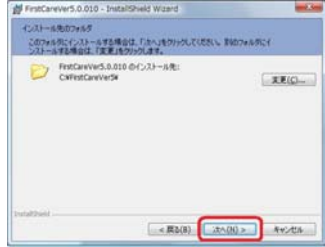





※以下の画面イメージにつきましては、バージョンアップ等により予告なく変更する場合がございます。
また、一部の画面については案内を載せておりませんのでご了承願います。

※操作の途中で「セキュリティの警告」が表示されたら「許可」をクリックしてください。

1	<p>起動している他のプログラムがある場合は終了します。</p> <p>※他のプログラムが起動されていると、インストール失敗の原因となります。</p>	
2	<p>「FirstCareVer.5 製品版」の CD-ROM をパソコンの CD ドライブ（または DVD ドライブ）に挿入します。</p> <p>※CD-ROM のデザイン（右画像イメージ）は予告なく変更する場合がございます。</p>	 <p>(※イメージ)</p>
3	<p>CD ドライブ（または DVD ドライブ）が自動で起動します。</p> <p>一覧より「Setup.exe の実行」をクリックします。</p> <p>※自動で起動されない場合、スタートメニューから[コンピューター]を選択し、一覧から CD ドライブ（または DVD ドライブ）のアイコンをダブルクリックして実行します。</p> <p>※操作の途中で「セキュリティの警告」が表示されたら「許可」をクリックしてください。</p>	

4	<p>「インストールの準備をしてします。…」が表示されるので、そのままお待ちください。</p>	
5	<p>自動でプログラムが起動し、「FirstCareVer.5 初期セットアップ用の InstallShield ウィザードへようこそ…」が表示されます。 [次へ] をクリックします。</p>	
6	<p>「使用許諾契約」が表示されます。 内容をよくお読みになり、承諾する場合は「使用許諾契約の条項に同意します」をクリックし、[次へ] をクリックします。</p>	
7	<p>「インストール先のフォルダ」が表示されます。 表示されたフォルダにインストールする場合は、[次へ] をクリックします。 ※特別な理由がない限り、表示内容のまま、[次へ] をクリックしてください。</p>	
8	<p>「プログラムをインストールする準備ができました」が表示されます。 インストールを行う場合は、[インストール] をクリックします。 ※操作の途中で「セキュリティの警告」が表示されたら「許可」をクリックしてください。</p>	
9	<p>「InstallShield ウィザードは FirstCareVer5 初期セットアップをインストールしています。…」が表示されるので、そのままお待ちください。 (インストールには数分かかる場合がございます。)</p>	
10	<p>「InstallShield ウィザードを完了しました…」が表示されるので、[プログラムの起動] に☑をつけて [完了] をクリックします。</p>	

<p>11 「サーバー版・クライアント版の選択」が表示されます。インストールする環境によりいずれかを選択し、[OK] をクリックします。サーバー版 (スタンダード版) もしくはクライアント版がインストールされます。</p> <p>(インストールには数分かかる場合がございます。)</p> <p>※本画面が表示されない場合は、デスクトップ上の[スタートボタン]→[すべてのプログラム]→[FirstCareVer5 初期セットアップ]から[Setup]を起動願います。</p>	 <p>ご注意ください!</p> <p>※スタンダードタイプでご契約の場合は、サーバー版をインストールします。</p> <p>※ネットワークタイプでご契約の場合は、1 台は親機としてサーバー版をインストールします。 2 台目からのインストールはクライアント版をインストールします。</p>
<p>12 「データベース (FirstCareVer5) のセットアップを開始します。…」が表示されるので、[OK] をクリックします。</p> <p>手順 1 1 でクライアント版を選んでいる場合は、本画面は自動でスキップされます。</p>	
<p>13 Microsoft SQL Server 2005 (Windows8 の場合は Microsoft SQL Server2012) がインストールされます。</p> <p>そのままおまちください。</p> <p>(インストールには数分かかる場合がございます。)</p> <p>※操作の途中で「セキュリティの警告」が表示されたら「許可」をクリックしてください。</p>	
<p>14 「ファーストケア V5 をインストールします。…」が表示されます。[次へ] をクリックします。</p>	
<p>15 「FirstCare Ver.5.***. **用の Install Shield ウィザードへようこそ…」が表示されます。[次へ] をクリックします。</p>	

<p>16 「使用許諾契約」が表示されます。 内容をよくお読みになり、承諾する場合は「使用許諾契約の条項に同意します」をクリックし、[次へ] をクリックします。</p>	
<p>17 「インストール先のフォルダ」が表示されます。 表示されたフォルダにインストールする場合は、[次へ] をクリックします。 ※特別な理由がない限り、表示内容のまま、[次へ] をクリックしてください。</p>	
<p>18 「プログラムをインストールする準備ができました」が表示されます。 インストールを行う場合は、[インストール] をクリックします。 ※操作の途中で「セキュリティの警告」が表示されたら「許可」をクリックしてください。</p>	
<p>19 「FirstCareVer5. * * * . * * をインストールしています。…」が表示されるので、そのままお待ちください。 (インストールには数分かかる場合がございます。)</p>	
<p>20 「InstallShield ウィザードを完了しました…」が表示されるので、[完了] をクリックします。 インストール完了後、デスクトップ上に FirstCare Ver.5 のショートカットアイコンが表示されます。</p> <div data-bbox="304 1559 1417 2018" style="border: 1px solid orange; padding: 10px;"> <p>【ご参考】ショートカットアイコンについて</p> <p>インストールが完了すると、デスクトップにアイコンが自動作成されます。ファーストケアを起動するときは、こちらのアイコンをダブルクリックします。<u>アイコンの色は、インストールしたソフトによって異なります。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・■ 居宅介護支援版…橙色 ・■ 居宅サービス提供版…緑色 ・■ グループホーム版…水色 ・■ 特定施設版…青色 <p>※「居宅介護支援版」「居宅サービス提供版」は橙色と緑色の2つのアイコンが作成されます。不要な場合は削除してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="1075 1585 1355 1733">  </div> <div data-bbox="1075 1821 1355 1973">  </div> </div> </div>	

これでインストールは完了です！